


SKYDENT

Curetas Gracey mango de silicona Skydent

La cureta Gracey Skydent es un instrumento de uso periodontal diseñado para procedimientos de raspado y alisado radicular con alta precisión.

Categoría	Instrumental
Presentación	unidad
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico

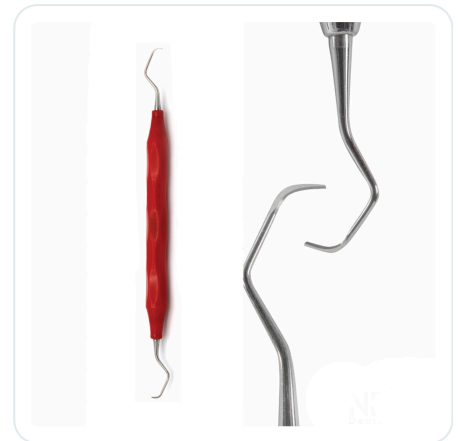

OPCIONES DISPONIBLES · NÚMERO

1/2 11/12 13/14 15/16 3/4 5/6 7/8 9/10

CARACTERÍSTICAS

- Su característica angulación de hoja a 70° respecto al cuello y su filo activo en un solo lado permiten una adaptación óptima a la superficie radicular, eliminando el cálculo subgingival y la placa bacteriana adherida sin lacerar el tejido blando.
- Cada par de números está diseñado para una zona anatómica específica, lo que facilita el tratamiento área-específico que demanda la periodoncia moderna.
- Fabricada en acero inoxidable de grado quirúrgico, la cureta Skydent resiste múltiples ciclos de afilado y esterilización en autoclave manteniendo el filo y la integridad de su parte activa.
- Su mango ligero, generalmente con superficie texturizada, mejora el control digital durante movimientos cortos y firmes, reduciendo la fatiga del operador en sesiones extensas.
- Estas curetas son indispensables tanto en la fase básica del tratamiento periodontal como en la fase de mantención, y forman parte del set imprescindible de cualquier clínica dental que practique periodoncia no quirúrgica.
- Guía rápida de uso por zona Cureta Gracey Zona indicada 1/2 y 3/4 Incisivos y caninos (todas las caras) 5/6 Anteriores y premolares (caras libres) 7/8 y 9/10 Premolares y molares (vestibular y lingual) 11/12 Caras mesiales de molares 13/14 Caras distales de molares

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.